


Repositioning clip

/Clip Repositionnable /Clip Reposicionable

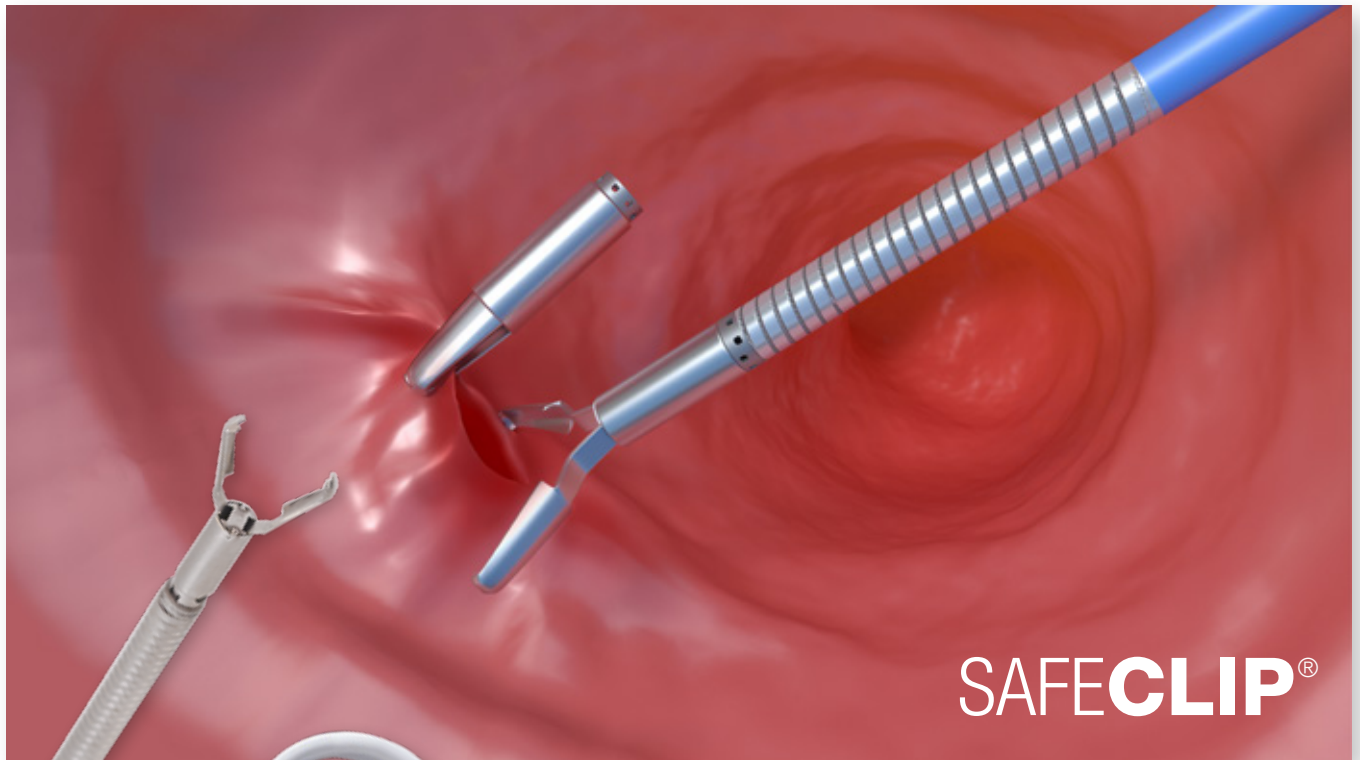

Repositioning clip

/Clip repositionnable /Clip reposicionable

Flexible distal end for easy access and positioning

/Extrémité distale flexible pour un accès et un positionnement facile/Punta distal flexible permitiendo fácil acceso y posicionamiento

Large opening for efficient tissue grasping

/Grande ouverture des mors pour une préhension efficace des tissus/Grande apertura para agarre eficaz del tejido

Rotatable action one-by-one for easy manipulation

/Action rotative directement à la poignée/Acción giratoria uno para uno permitiendo fácil manipulación

Locking system when the clip is placed to avoid tracking wire exposure outside the spiral

/Système de blocage quand le clip est largué pour éviter l'exposition du fil de traction/Sistema de bloqueo cuando el clip ya se ha disparado evitando exposición del hilo de tracción hacia fuera de la espiral

Repositioning Clip

/Clip Repositionnable /Clip Reposicionable



Reference Réf. / Ref.	Length (cm) Long. / Longitud	Diam. (mm) Diam. / Diám.	Clip opening (mm) Ouverture du clip / Apertura del clip	Angle Angle / Angulo
U2525-230	230	2.5	13	135°
U2511-180	180	2.6	11	135°
U2511-230	230	2.6	11	135°
U2516-180	180	2.6	16	135°

