



CLUTCHCUTTER



LA HERRAMIENTA ESD 3 EN 1 PARA DIVERSAS TÉCNICAS

El ClutchCutter es una herramienta para disección endoscópica de la submucosa (ESD) ampliamente comprobado que permite al usuario sujetar, disecar eléctricamente y coagular la mucosa del tracto gastrointestinal superior e inferior. En procedimientos que requieren realizarse de forma perpendicular a la capa muscular, el ClutchCutter permite sujetar, elevar y disecar el tejido de manera progresiva.



ClutchCutter

Mandíbulas dentadas para sujetar la mucosa de forma eficiente.


Mandíbulas distales rotatorias para un abordaje preciso de la lesión.

Borde exterior aislado para reducir el riesgo de dañar el tejido circundante.


CLUTCH CUTTER ESD KNIFE




Modelo	Material code	Características	Identificador	Knife length (mm)	Working length (mm)	Ø Working channel (mm)
DP2618DT - 35 -	16444210	ESD Scissor	- 35 -	3.5	1,800	2.8 or more
DP2618DT - 50 -	16444222	ESD Scissor	- 50 -	5.0	1,800	2.8 or more

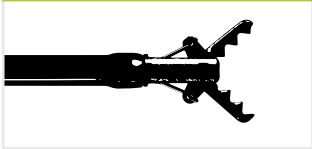

DP2618DT -35-: 3.5 mm jaw length

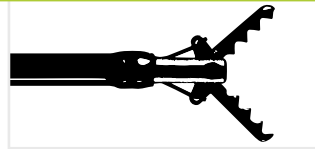

DP2618DT -50-: 5.0 mm jaw length

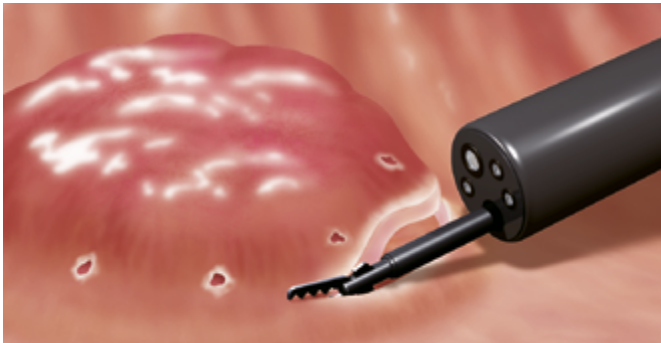

1. Incisión



2. Disección



3. Coagulación

Capacidad 3 en 1

Todas las etapas de la ESD pueden realizarse con esta herramienta 3 en 1, desde el marcaje hasta la realización de incisiones y la coagulación.